





De OneTouch Reveal[®] mobiele app instellen met Android


ONETOUCH[®]


Stap 1: De mobiele app downloaden

A  Zoek het Google Play icoon op uw Android toestel

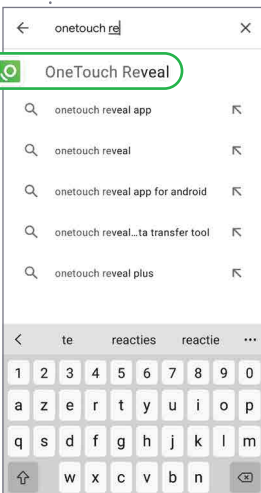B  The screenshot shows the search results for 'onetouch reveal' in the Google Play Store. The search bar at the top contains 'onetouch reveal'. Below the search bar, a list of suggestions is displayed, with 'OneTouch Reveal' highlighted in green. A keyboard is visible at the bottom of the screen.

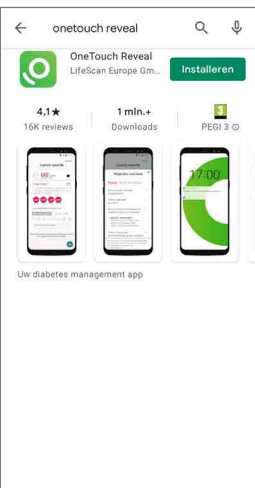C  The screenshot shows the app page for 'OneTouch Reveal' by LifeScan Europe GmbH. The app has a 4.1 star rating from 16K reviews and over 1 million downloads. It is rated PEGI 3. The 'Installeren' (Install) button is visible in the top right corner. Below the app icon, there are three preview images showing the app's interface on a smartphone.

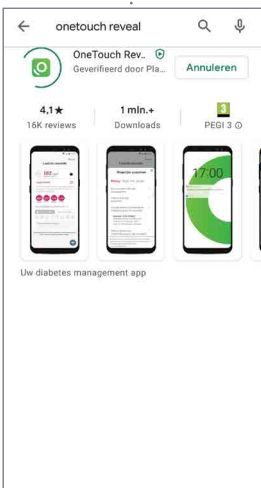D  The screenshot shows the app page for 'OneTouch Reveal' by LifeScan Europe GmbH. The app has a 4.1 star rating from 16K reviews and over 1 million downloads. It is rated PEGI 3. The 'Verwijderen' (Remove) button is visible in the top right corner. Below the app icon, there are three preview images showing the app's interface on a smartphone.

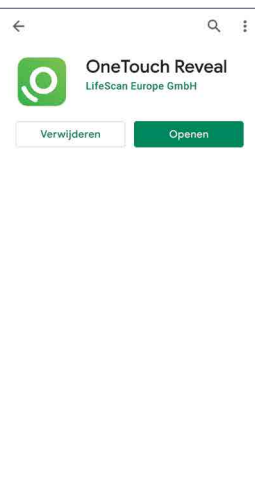E  The screenshot shows the app page for 'OneTouch Reveal' by LifeScan Europe GmbH. The app has a 4.1 star rating from 16K reviews and over 1 million downloads. It is rated PEGI 3. The 'Openen' (Open) button is visible in the top right corner. Below the app icon, there are three preview images showing the app's interface on a smartphone.

Stap 2: Een OneTouch Reveal® account creëren




Stap 3: De meter koppelen (Deel 1)




BELANGRIJK


Zorg ervoor dat Bluetooth® aanstaat zowel op de meter als uw smartphone

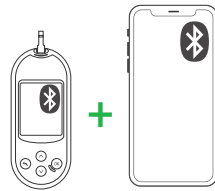

A

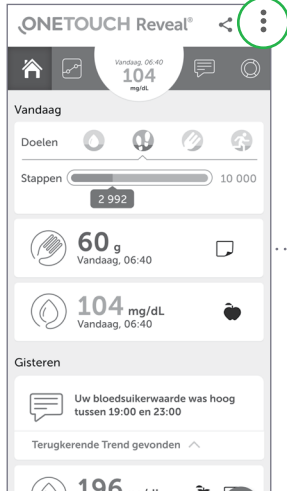


B

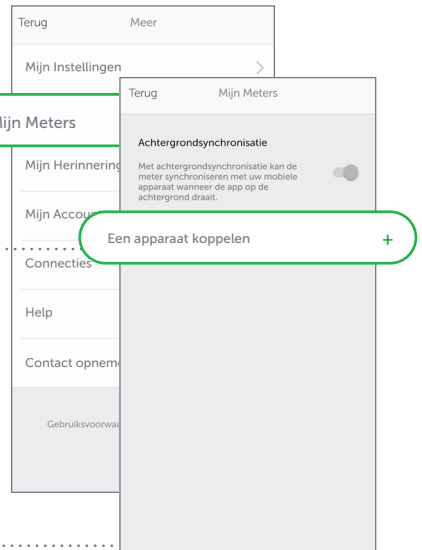


C



D

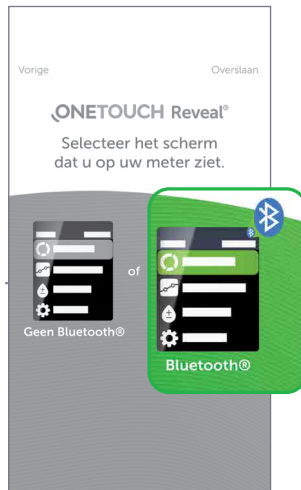

Stap 3: De meter koppelen (Deel 2)

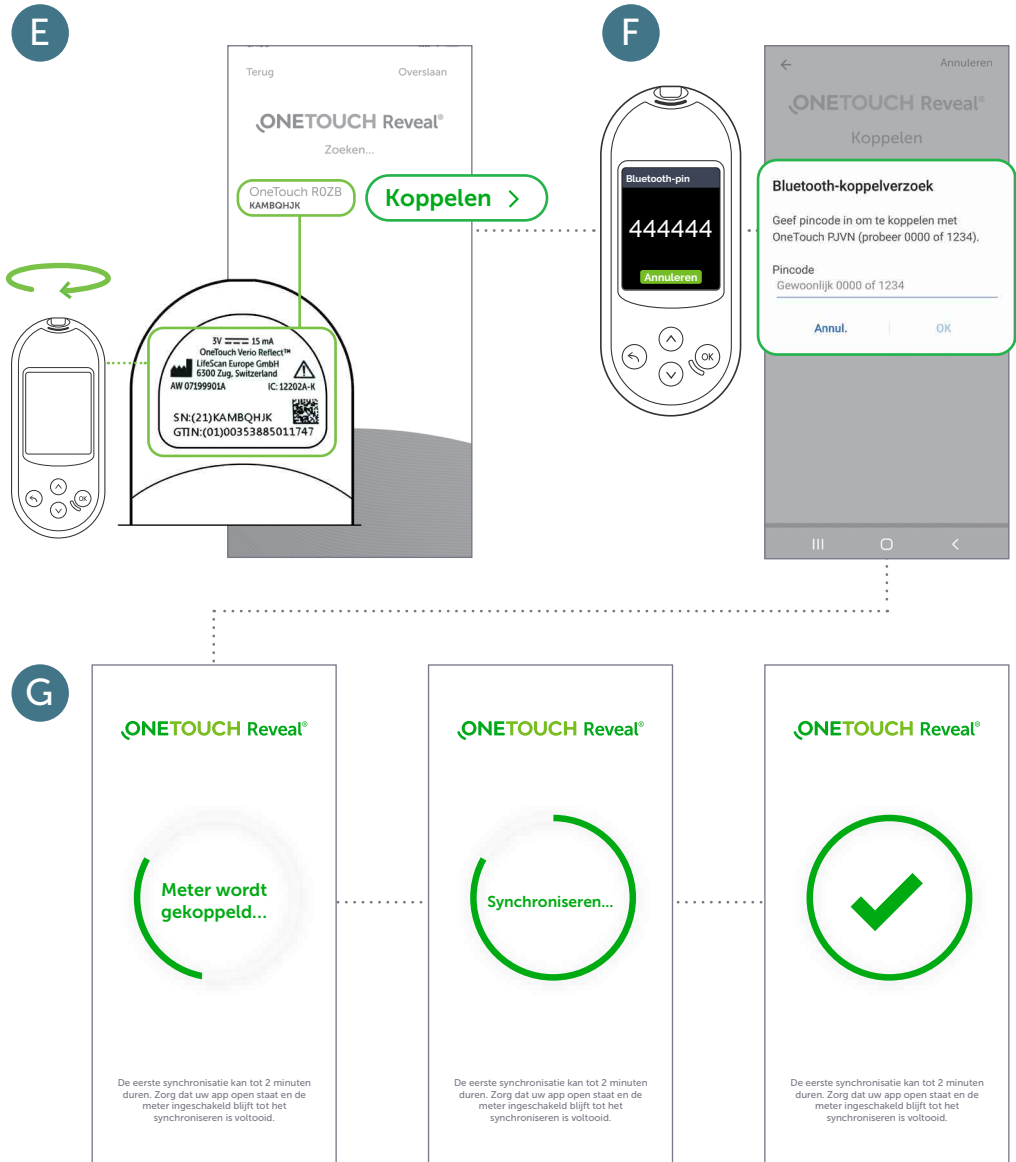


Helemaal klaar!

U kunt nu beginnen synchroniseren.


Stap 4: Uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener delen

Optie 1:
Gebruik de kliniecode van uw professionele zorgverlener

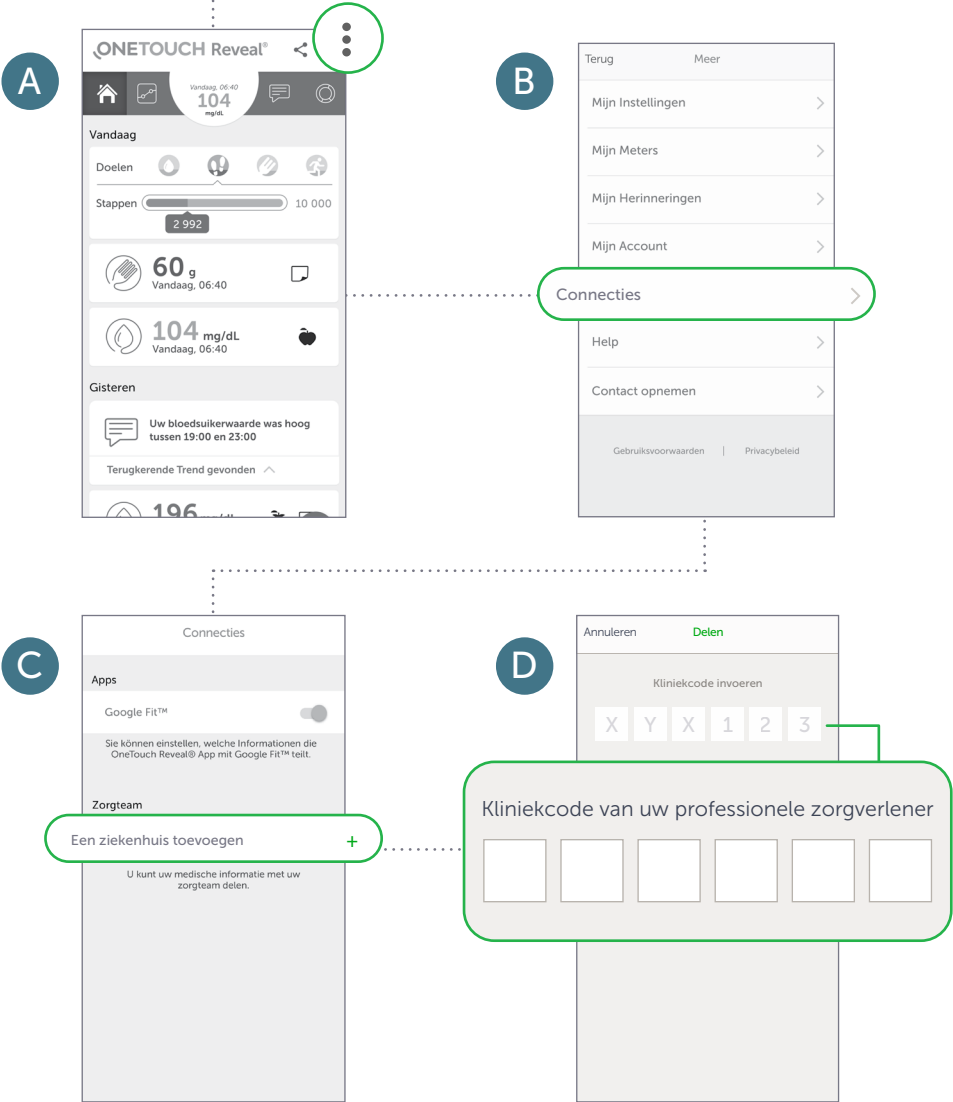

Stap 4: Uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener delen

Optie 2: Een PDF rapport delen per e-mail

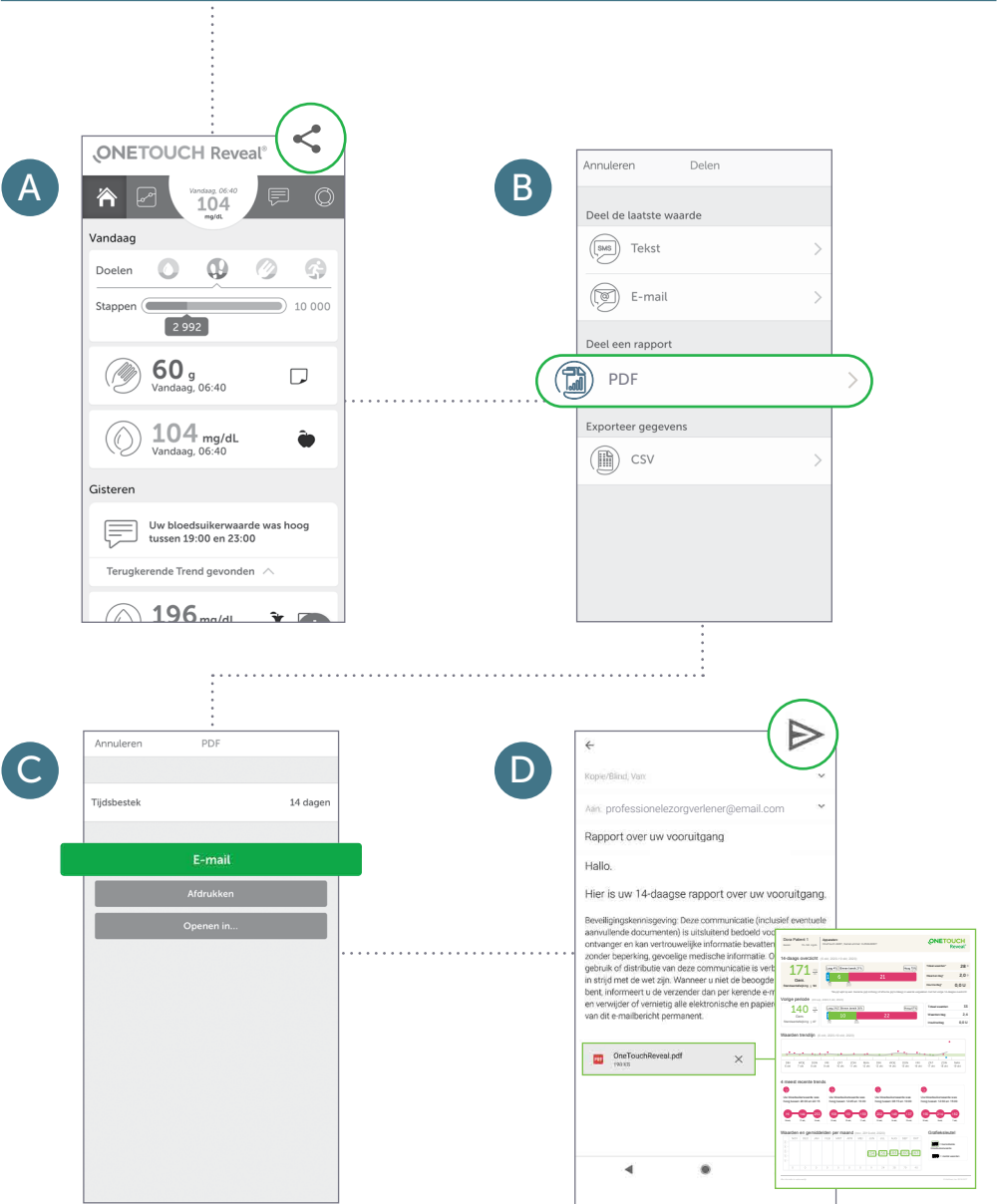

Kliniekcode van uw professionele zorgverlener

--	--	--	--	--	--



**Contacteer de
OneTouch® Klantendienst
0800 15325 (bel gratis)**



contact@OneTouch.be



**www.OneTouch.be
www.OneTouchReveal.be**



Bekijk de video's

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door LifeScan Schotland is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars. Google Play en Google Play logo zijn trademarks van Google LLC

© 2020 LifeScan Belgium BV, BE-DMV-2000013

ONETOUCH®